

ORTEZE

- cervicale
- pentru coloana vertebrală
- pentru membre

MEDICAL
EXPRESS

Producător: Vettel
Pentru o postură corectă și comodă!



GAME DE PRODUSE MEDICAL EXPRESS:



Protezare stomii




Retenție urinară



Incontinență urinară



Plase chirurgicale

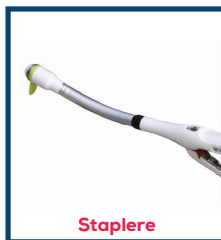

Staplere



Dispozitive de îngrijire
la domiciliu



Proteze externe
de sân



Orteze



Fotolii rulante
și dispozitive de mers

Orteză cervicală rigidă

Cod	Mărimi	Perimetru gât
1100	XS/1	< 35 cm
	S/2	35-39 cm
	M/3	39-44 cm
	L/4	44-48 cm
	XL/5	> 48 cm

Caracteristici

- confecționată din polietilenă
- învelită cu piele sintetică hipoalergenă, în zonele de contact cu tegumentul
- prevăzută cu perforații ce permit respirația tegumentului
- prevăzută cu sistem de benzi Velcro ce permite reglarea pe înălțime
- formă anatomică
- culoare albă

Avantaje și beneficii

- Reglare optimă la orice dimensiune a gâtului
- Nivel excelent de ventilație și respirație a tegumentului
- Asigură un confort sporit și fixare sigură a segmentului vizat

Indicații

- Dureri cervicale de cauză musculară sau traumatică
- Traumatisme cervicale
- Imobilizare cervicală



 **VETTEL**

1
2
3

Orteză cervicală cu suport pentru bărbie

Cod	Mărimi	Perimetru gât
1110	XS/1	< 34 cm
	S/2	34-38 cm
	M/3	38-43 cm
	L/4	43-47 cm
	XL/5	> 47 cm

Caracteristici

- confecționată din polietilenă
- învelită cu piele sintetică hipoalergenă, în zonele de contact cu tegumentul
- prevăzută cu sprijin pentru bărbie și cu perforații ce permit respirația tegumentului
- prevăzută cu sistem de benzi Velcro ce permite reglarea pe înălțime
- formă anatomică
- culoare albă

Avantaje și beneficii

- Reglare optimă la orice dimensiune a gâtului
- Permite restricționarea mecanică a mișcărilor de flexie a gâtului
- Nivel excelent de ventilație și respirație a pielii
- Asigură un confort sporit și fixare sigură a segmentului vizat

Indicații

- Dureri cervicale de cauză musculară sau traumatică
- Traumatisme cervicale
- Imobilizare cervicală



 **VETTEL**

1
2
3

Orteză cervicală Philadelphia

Cod	Mărimi	Perimetru gât
1140	S/1	25-31 cm
	M/2	32-38 cm
	L/3	39-48 cm

Caracteristici

- structură rigidă
- sprijin frontal pentru bărbie și sprijin occipital
- prezintă perforații ce permit respirația tegumentului
- prevăzută cu sistem dublu de benzi Velcro pentru închidere
- formă anatomică
- culoare bej

Avantaje și beneficii

- Stabilitate și siguranță garantate
- Restricționează mecanic mișcările gâtului
- Formă anatomică
- Nivel excelent de ventilație și respirație a pielii
- Asigură un confort sporit eliminând presiunile la nivelul traheei sau al zonelor latero-frontale
- Permite mișcarea fiziologică a maxilarului

Indicații

- Imobilizare după traumatisme cervicale
- Imobilizare postoperatorie
- Imobilizare cervicală
- Dureri cervicale de origine musculară sau traumatică care necesită imobilizarea în faza acută sau pe perioada recuperării



 **VETTEL**

1
2
3

Orteză cervicală Schantz

Cod	Mărimi	Perimetru gât
1011	unică	30-45 cm

Caracteristici

- moale, semirigidă
- confecționată din spumă din poliuretan învelită în bumbac
- prevăzută cu sistem de închidere cu benzi Velcro
- formă anatomică
- lățime de 75 mm

Avantaje și beneficii

- Asigură fixarea lejeră a zonei cervicale
- Generează căldură locală, cu efecte terapeutice
- Ajustabilă oricărei mărimi a gâtului
- Poate fi utilizată atât ziua, cât și noaptea
- Adaptată utilizării pe timp de noapte

Indicații

- Imobilizarea ușoară a zonei cervicale
- Crize acute de artroză cervicală
- Subluxații cervicale
- Substituirea treptată a unei orteze rigide



 **VETTEL**

1
2
3

Centură abdominală 20 cm

Cod	Mărimi	Circumferință toracică
120	S/1	70-90 cm
	M/2	90-110 cm
	L/3	110-130 cm

Caracteristici

- lățime de 20 cm
- alcătuită din 34% poliester, 35% elastan, 31% bumbac
- ranforsare dublă pentru o bună susținere abdominală
- ajustabilă prin mutarea benzilor Velcro
- culoare albă

Avantaje și beneficii

- Permite respirația și transpirația tegumentului
- Realizează o susținere sigură a abdomenului
- Permite ajustarea în funcție de dimensiunile corpului
- Presiunea exercitată asupra abdomenului poate fi modificată ori de câte ori este nevoie

Indicații

- Protecția peretelui abdominal în caz de eventrație sau hernie abdominală
- Traumatisme abdominale
- Recuperare postoperatorie după intervenții abdominale
- Perioada postnatală



 **VETTEL**

1
2
3

Centură abdominală 24 cm

Cod	Mărimi	Circumferință toracică
124	S/1	70-90 cm
	M/2	90-110 cm

Caracteristici

- lățime de 24 cm
- compusă din 3 secțiuni elastice
- sistem unic "Fagoty-Singer" care permite fiecărei secțiuni elastice să lucreze independent
- ajustabilă prin mutarea benzilor Velcro

Avantaje și beneficii

- Adaptabilă oricărei forme anatomice datorită celor 3 secțiuni elastice independente
- Permite respirația și transpirația tegumentului
- Realizează o susținere sigură a abdomenului
- Permite ajustarea în funcție de dimensiunile corpului
- Presiunea exercitată asupra abdomenului poate fi modificată ori de câte ori este nevoie

Indicații

- Protecția peretelui abdominal în caz de eventrație sau hernie abdominală
- Traumatisme toracice și abdominale
- Recuperare postoperatorie după intervenții abdominale
- Perioada postnatală
- Traumatisme musculare abdominale



 **VETTEL**

1
2
3

Centură abdominală 32 cm

Cod	Mărimi	Circumferință toracică
132	L/3	110-130 cm
232	XL/4	130-150 cm

Caracteristici

- lățime de 32 cm, compusă din 4 secțiuni elastice
- sistem unic "Fagoty-Singer" care permite fiecărei secțiuni elastice să lucreze independent
- ajustabilă prin mutarea benzilor Velcro

Avantaje și beneficii

- Adaptabilă oricărei forme anatomice datorită celor 4 secțiuni elastice independente
- Permite respirația și transpirația tegumentului
- Realizează o susținere sigură a abdomenului
- Permite ajustarea în funcție de dimensiunile corpului
- Presiunea exercitată asupra abdomenului poate fi modificată cată ori de câte ori este nevoie
- Modelul 232 este autoadeziv

Indicații

- Protecția peretelui abdominal în caz de eventrație sau hernie abdominală
- Traumatisme toracice și abdominale
- Recuperare postoperatorie după intervenții abdominale
- Perioada postnatală
- Traumatisme musculare abdominale



 **VETTEL**

1
2
3

Ham de memorie

Cod	Mărimi	Circumferință toracică
141	XS/1	50-65 cm
	S/2	65-80 cm
	M/3	80-95 cm
	L/4	95-110 cm
	XL/5	110-125 cm

Caracteristici

- material hipodergen din monofilamente elastice
- ajustabil datorită sistemului de închidere Velcro

Avantaje și beneficii

- Permite corecția de lungă durată a posturii vicioase a coloanei
- Asigură o bună respirație a tegumentului
- Poate fi purtat în contact direct cu pielea
- Ajustabil oricărui perimetru toracic
- Conferă sprijin toracic combinat cu susținere abdominală

Indicații

- Corecția cifozelor juvenile
- Tratament de recuperare a coloanei vertebrale
- Menținerea poziției corecte a spatelui



 **VETTEL**

1
2
3

Corset Hessing

Cod	Mărimi	Circumferință talie
3058	XS/1	66-76 cm
	S/2	77-86 cm
	M/3	87-96 cm
	L/4	97-106 cm
	XL/5	107-116 cm
	XXL/6	117-126 cm

Caracteristici

- lățime spate: 58 cm
- confecționat din monofilamente elastice: 64% poliamidă, 36% elasthan
- benzi elastice încrucișate în zona lombară cu sistem frontal de fixare
- reglare optimă datorită sistemului de închidere Velcro
- prevăzut cu 2 tije rigide și 2 tije flexibile, opționale, în zona lombară
- prezintă 2 tije flexibile în regiunea abdominală
- protecție termică în zona lombară

Avantaje și beneficii

- Permite corecția de lungă durată a posturii vicioase a coloanei
- Asigură o compresie uniformă, parțială sau totală
- Conferă un grad ridicat de confort
- Asigură o bună respirație a tegumentului

Indicații

- Tratarea durerilor lombare T1-S1
- Traumatisme dorsolombare

- Artrită vertebrală dureroasă
- Decalcifieri lombare, ușoare deviații lombare, oboseală, reumatism
- Tratamente postoperatorii
- Stabilizarea și controlul poziției coloanei dorsolombare



 **VETTEL**

1
2
3

Orteză lombosacrală

Cod	Mărimi	Circumferință talie
3022	XS/1	66-76 cm
	S/2	77-86 cm
	M/3	87-96 cm
	L/4	97-106 cm
	XL/5	107-116 cm

Caracteristici

- lățime spate: 22 cm
- structură elastică din monofilamente
- prevăzută cu 3 tije dorsale
- tija centrală poate fi îndepărtată la nevoie
- fixare cu benzi Velcro

Avantaje și beneficii

- Conferă un grad ridicat de confort
- Asigură o bună respirație a tegumentului
- Ajustabilă în funcție de circumferința taliei, prin mutarea benzilor Velcro

Indicații

- Prevenirea și tratarea durerilor acute/cronice din lumbago sau sciatică
- Decalcifieri lombare, ușoare deviații lombare, oboseală, reumatism
- Suport lombosacral în muncile fizice oboseitoare



 **VETTEL**

1
2
3

Orteză lombosacrală

Cod	Mărimi	Perimetru talie
3025	XS/1	66-76 cm
	S/2	77-86 cm
	M/3	87-96 cm
	L/4	97-106 cm
	XL/5	107-116 cm

Caracteristici

- lăţime spate: 25 cm
- confecţionat din monofilamente elastice: 64% poliamidă, 36% elasthan
- benzi elastice încrucişate în zona lombară cu sistem de fixare frontal
- reglare optimă, datorită sistemului de închidere Velcro
- prevăzut cu 4 tije rigide, 2 opţionale, în zona lombară
- 2 tije flexibile în regiunea abdominală
- protecţie termică în zona lombară
- centură abdominală de susţinere

Avantaje şi beneficii

- Conferă un grad ridicat de confort
- Asigură o bună respiraţie a tegumentului
- Ajustabilă în funcţie de circumferinţa taliei, prin mutarea benzilor Velcro

Indicaţii

- Prevenirea şi tratarea durerilor acute/cronice din lumbago sau sciatică
- Decalcifieri lombare, uşoare deviaţii lombare, oboseală, reumatism
- Suport lombosacral în muncile fizice obositoare



 **VETTEL**

1
2
3

- Traumatisme lombare
- Artrită vertebrală dureroasă
- Susţinerea peretelui abdominal în caz de eventraţie
- Corecţia posturii vicioase
- Recuperare postoperatorie

Orteză lombosacrală

Cod	Mărimi	Perimetru talie
3026	XS/1	66-76 cm
	S/2	77-86 cm
	M/3	87-96 cm
	L/4	97-106 cm
	XL/5	107-116 cm

Caracteristici

- lăţime spate: 26 cm
- confecţionat din monofilamente elastice: 64% poliamidă, 36% elasthan
- benzi elastice încrucişate în zona lombară
- reglare optimă, datorită sistemului de închidere Velcro
- prevăzut cu 4 tije rigide, 2 opţionale, în zona lombară
- protecţie termică în zona lombară

Avantaje şi beneficii

- Conferă un grad ridicat de confort
- Asigură o bună respiraţie a tegumentului
- Ajustabilă în funcţie de circumferinţa taliei, prin mutarea benzilor Velcro

Indicaţii

- Prevenirea şi tratarea durerilor acute/cronice din lumbago sau sciatică
- Decalcifieri lombare, uşoare deviaţii lombare, oboseală, reumatism
- Suport lombosacral în muncile fizice oositoare
- Traumatisme lombare



 **VETTEL**

1
2
3

- Artrită vertebrală dureroasă
- Susţinerea peretelui abdominal în caz de eventraţie
- Corecţia posturii vicioase
- Recuperare postoperatorie

Orteză lombosacrală

Cod	Mărimi	Perimetru talie
FT24	S/1	65-80 cm
	M/2	81-96 cm
	L/3	97-112 cm
	XL/4	113-128 cm

Caracteristici


- suport lombar optim
- sistem dublu de benzi de susținere
- material ușor

Avantaje și beneficii

- Design adaptat eforturilor fizice și practicării sporturilor
- Asigură un confort sporit
- Permite respirația tegumentului

Indicații

- Patologii lombare
- Prevenirea traumatismelor spatelui
- Suprasolicitare lombară

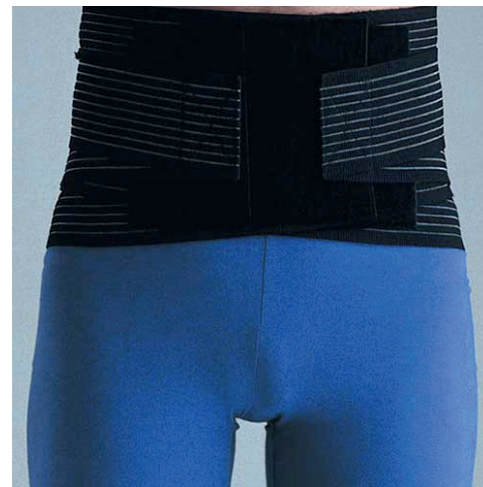

 **VETTEL**

1
2
3

Centură inghinală

Cod	Mărimi	Perimetru talie
6040	S/1	75-85cm
	M/2	85-95 cm
	L/3	95-110 cm



Caracteristici

- suport inghinal pentru hernie unilaterală/bilaterală
- suport anatomic din cauciuc, învelit cu bumbac
- învelișul poate fi îndepărtat, pentru spălare
- închidere și reglare cu cataramă din plastic

Avantaje și beneficii

- Fixare ușoară
- Asigură un confort sporit
- Nivel ridicat de siguranță

Indicații

- Herniile inghinale unilaterale/bilaterale cu volum redus sau ușor reductibile
- Utilizare temporară înainte de operație
- Postoperator

 **VETTEL**

1
2
3

Suport pentru braț Velpeau

Cod	Mărimi	Culoare
157	unică	Bej

Caracteristici

- structură laminată
- acoperit cu bumbac antialergen
- compoziție: 30% poliamidă, 30% bumbac, 40% spumă de poliester

Avantaje și beneficii

- Asigură confort și protecție termică zonei afectate
- Împiedică apariția reacțiilor alergice
- Asigură o imobilizare optimă a umărului

Indicații

- Imobilizarea cotului după traumatisme
- Susținere braț gipsat
- Traumatisme ale antebrățului și ale articulației pumnului



 **VETTEL**

1
2
3

Orteză fixă de genunchi

Cod	Mărimi	Lungime picior
560	XS/0	30 cm
	S/1	40 cm
	M/2	50 cm
	L/3	60 cm
	XL/4	70 cm



Caracteristici

- compusă din 3 părți distincte legate prin sistem de benzi Velcro
- unghi fix de flexare a genunchiului datorită tijelor laterale și posterioare de aluminiu
- detașabilă
- căptușită cu material din bumbac



Avantaje și beneficii

- Posibilitate ușoară de îndepărtare pentru a permite realizarea exercițiilor din timpul kinetoterapiei
- Adaptare perfectă la grosimea piciorului prin ajustarea benzilor Velcro
- Asigură un confort sporit și o fixare optimă
- Împiedică apariția edemului, permite realizarea exercițiilor izometrice și mobilizarea pasivă a rotulei

Indicații

- Traumatisme la nivelul genunchiului
- Recuperare postoperatorie
- Imobilizarea totală a genunchiului
- Susținere în cazul fracturilor de rotulă
- Osteoartrită degenerativă
- Bursite prerotuliene
- Orice tip de afecțiune care necesită imobilizarea temporară a genunchiului

Orteză mobilă de genunchi

Cod	Mărimi
AD-501	unică

Caracteristici

- mobilă
- compusă din părți textile reglabile
- suport din polipropilenă
- prevăzută cu 2 articulații monocentrice care permit o extensie între 0-90° și o flexie între 0-120°
- increment de 7.5°
- sistem de fixare și reglare cu benzi Velcro

Avantaje și beneficii

- Adaptare perfectă la dimensiunile piciorului
- Asigură un confort sporit
- Posibilitate de transformare într-o variantă mai scurtă, după cum urmează:

1. decupați încheieturile ortezei urmărind marcasele
2. decupați bucățile textile sub marcajul roșu
3. înlocuiți bucățile mari de plastic cu cele de dimensiuni reduse (livrate separat)
4. adăugați benzile reglabile

Indicații

- Recuperare în perioadele postoperatorii și post-traumatice
- Mișcări limitate și controlate ale genunchiului



 **VETTEL**

1
2
3

DATE DE CONTACT

SEDIU CENTRAL

Bulevardul Mihail Kogalniceanu nr 35, parter, Sector 5, București

Tel: 031 433 6111 sau 031 433 6133

Fax: 021 410 55 83

Mobil: 0726 334 225

E-mail: office@medicalexpress.ro
Relații clienți: clienti@medicalexpress.ro

Program: L-V: 9.00-17.30

M E D I C A L
EXPRESS